

HI-730

ترازوی دیجیتال های تک با استفاده از تکنولوژی BIA برای سنجش پیشرفته با اتصال به کامپیوتر از طریق پورت USB و CD قابل نصب



hi-tec

HI-730

ترازوی دیجیتال هایتک با استفاده از تکنولوژی BIA برای سنجش پیشرفته با اتصال به کامپیوتر از طریق پورت USB و CD قابل نصب



نمایشگر بزرگ برای نمایش همزمان تمامی اطلاعات

مشخصات


- ظرفیت: 150 کیلوگرم
- 150kg/330lb/23st:8lb
- روشن شدن با اشاره پا (سریع و راحت) - خاموش شدن خودکار
- سه کلید اجرایی: "Set" تأیید و تنظیم - "Up" بالا - "Down" پائین
- محدوده سنجش توده چربی بدن: 5% ~ 80%
- دقت سنجش توده چربی بدن: 0.1%
- محدوده سنجش میزان آب بدن: 10% ~ 80%
- دقت سنجش میزان آب بدن: 0.1%
- ذخیره اطلاعات تا 10 نفر و حفظ اطلاعات اندازه گیری شده تا 365 مورد قبلی بدون نیاز به پاک کردن
- محدوده سن: 10 ~ 80
- محدوده قد: 100 ~ 240 سانتیمتر / 3.5 ~ 10.5 اینچ / 7 ~ 3 فوت
- دارای 4 سنسور هاشمند در پایه ها (پاها به موازات سنسورها و صاف قرار گیرد)
- نمایشگر ظرفیت بیش از حد: "----"
- پیغام خطای کم یا زیاد بودن توده چربی بدن: "Err2"
- نمایشگر اتمام باتری: "LO"
- منبع تغذیه ترازو: باتری 2xAAA

همراه با ترازوهای دیجیتالی هایتک سلامتی و تندرستی را به زندگی خود هدیه کنید

تلفیقی از صنعت، تکنولوژی و هنر

کلیدهای اجرایی

■ این 3 کلید در قسمت لبه بالایی ترازو تعبیه شده است.

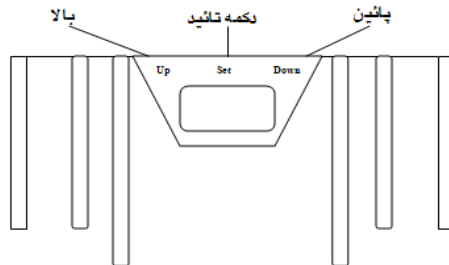

نحوه تعویض باتری

■ از قرار گرفتن صحیح سرهای +/- باتری اطمینان حاصل نمائید.

■ از ابزار مناسب جهت تعویض باتری ها استفاده نمائید.

نحوه وارد نمودن اطلاعات شخص

■ قبل از هر گونه استفاده در ابتدا لازم است اطلاعات مربوط به افراد (مشخصات 10 نفر در حافظه دستگاه قابل

ذخیره سازی است) وارد شود.

برای ورود به قسمت تنظیمات دکمه "Set" را فشار دهید برای تغییر موارد خواسته شده (اعداد، جنسیت، قد، سن)

از دکمه های "UP" و "Down" استفاده کنید و در آخر برای تأیید مجدداً دکمه "Set" را انتخاب کنید. پس از

اتمام تنظیمات به قسمت توزین بروید.

1. تنظیم اعداد (تعداد افراد)



2. تنظیم قد



3. تنظیم سن



طریقه اندازه گیری

1. بعد از انجام تنظیمات، هنگامی که صفحه نمایشگر 0.0 را نشان داد، بر روی ترازو ایستاده و چند ثانیه تامل نمائید تا مقدار اندازه گیری شده نمایش داده شود.




2. هنگامی که ترازو در حال اندازه گیری است شکل زیر بصورت چشمک زدن بر روی تصویر ظاهر می شود و سپس مقدار اندازه گیری شده، نمایش داده می شود.




نتیجه

1. دستگاه بصورت اتوماتیک فرد را تشخیص داده و سایر اندازه گیری های انجام شده که شامل توده چربی، میزان آب، عضلات و وزن نمایش داده می شود.

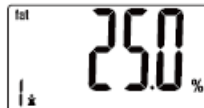

2. در صورتیکه دستگاه قادر به تشخیص فرد بصورت اتوماتیک نباشد پیغام "1234" بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود. در این صورت فرد می تواند با کلید های اجرایی مشخصات خود را وارد نماید و سپس مجدداً اندازه گیری را انجام دهد.

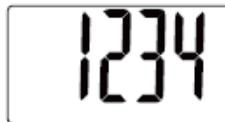

■ پس از انجام اندازه گیری ها، در آخر تمام اندازه گیری ها مجدداً توسط دستگاه نمایش داده شده و سپس دستگاه خاموش می شود.




165 cm



30 age

چک کردن آخرین اندازه گیری انجام شده هنگامی که دستگاه خاموش است و یا زمانی که 0.0 توسط صفحه نمایشگر نشان داده می شود، کلیدهای "Up" و یا "Down" را فشار داده تا آخرین اندازه گیری را مشاهده نمایید. پیام "----" به معنای خالی بودن حافظه دستگاه است.

1. نمایش آخرین اندازه گیری

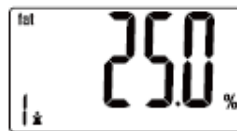

fat 250 %



MUS 380 %

2. بازگشت به آخرین وزن اندازه گیری شده



88 kg

*پیغام خطا

در صورتیکه نتیجه اندازه گیری اشتباه باشد، با پیغام "Err2" مواجه خواهید شد.



Err2

تناسب اندام با تکنولوژی پیشرفته ترازوی دیجیتال هایتک

محدوده اندازه گیری توده چربی، آب و عضلات

1. محدوده اندازه گیری چربی بدن (درصد) 5%-80%

مرد				زن				سن
چاق	چربی ↑	ایده آل	چربی ↓	چاق	چربی ↑	ایده آل	چربی ↓	
>25	19-25	8-19	<8	>39	33-39	20-33	<20	زیر 39
>28	22-28	11-22	<11	>40	35-40	23-35	<23	40-59
>30	25-30	13-25	<13	>42	36-42	24-36	<24	بالای 59

2. محدوده اندازه گیری آب بدن (درصد) 10%-80%

مرد			زن			جنسیت
بالا	متوسط	پائین	بالا	متوسط	پائین	
>72	1.58-72	<58	>67	57.1-67	<57	10-15
>67	53.1-67	<53	>57	47.1-57	<47	16-30
>61	47.1-61	<47	>52	42.1-52	<42	31-60
>56	42.1-56	<42	>47	37.1-47	<37	61-80

سالم و شاداب زندگی کنید

3. محدوده اندازه گیری عضله بدن (درصد) 13%-100%

مرد	زن	سن
متناسب	متناسب	
>40	>34	10~99

زندگی روزمره با خاطر آسوده

اتصال به کامپیوتر

دستگاه را از طریق پورت USB به کامپیوتر وصل کرده و سپس دکمه "Set" را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. نمایش کلمه "Load" بر روی مانیتور کامپیوتر به معنای انجام موفقیت آمیز اتصال است. سپس تاریخ، زمان و اطلاعات افراد که در حافظه ترازو ذخیره شده به کامپیوتر انتقال می یابد و در یک جدول به صورت کامل نمایش داده می شود.

*CD قابل نصب در جعبه ترازو قرار داده شده است که قبل از اتصال ترازو به کامپیوتر بایستی بر روی کامپیوتر نصب شود.

نکات مهم جهت استفاده صحیح

- بدون استفاده از جوراب و دمپایی از ترازو استفاده کنید.
- از قرار دادن ترازو بر روی موکت، فرش و یا سطح شیب دار جداً خودداری نمائید.
- هنگام استفاده از ترازو پاهای خود را خشک کرده و همچنین از خشک بودن سطح ترازو اطمینان حاصل نمائید.

♥ درباره شرکت های تک

های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی این شرکت به عنوان نماینده انحصاری های تک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است. های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور و ... است را با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه نمائید.

www.hitec-med.ca
www.hitec-med.ir

hi-tec

www.hitec-med.ca
Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات های تک به سایت زیر
مراجعه نمائید.

www.hitec-med.ir
محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 