

# ترازوی دیجیتال تشخیصی های تک



مدل : HI-AS62

با قابلیت محاسبه BMI (شاخص توده چربی بدن)

## مشخصات

- ❖ ظرفیت: ۱۸۰ کیلو گرم / ۳۹۷ پوند
- ❖ دقت سنجش: ۱/۰ کیلوگرم / ۲/۰ پوند
- ❖ واحد اندازه گیری: kg / lb
- ❖ کمترین میزان اندازه گیری: ۵kg
- ❖ کلیدهای عملیاتی: SELECT, ▲, ▼, LB/KG
- ❖ صفحه نمایش LCD با درخشش نور سفید
- ❖ قابلیت شناسایی ۴ کاربر
- ❖ عملکرد BMI (شاخص توده چربی بدن)
- ❖ محدوده اندازه گیری: ۲۲۰cm ~ ۱۰۰inch / ۲.۵ inch ~ ۳.۵ Ft
- ❖ شناسایی کاربر به طور خودکار بر اساس آخرین اندازه گیری انجام شده
- ❖ روشن و خاموش شدن خودکار
- ❖ منبع تغذیه ترازو: باتری (4×AA)

## BMI چیست؟

BMI چیست؟

BMI نسبت وزن به (Kg) و مجذور قد (به متر) است.

وزن (کیلوگرم)

BMI = \_\_\_\_\_

قد (متر) × قد (متر)

این شاخص نشان دهنده مقدار توده چربی بدن است که توسط این ترازو قابل اندازه گیری می باشد

## بر اساس ضریب توده بدنی BMI

BMI	طبقه بندی
کمتر از ۲۰	زیر وزن
۲۰ تا ۲۵	طبیعی
۲۵ تا ۳۰	اضافه وزن
۳۰ تا ۴۰	چاق
بالای ۴۰	چاقی شدید



## صفحه نمایشگر LCD

## عملکرد کلید ها

- کلید "▲" را برای افزایش مقادیر تنظیمات فشار دهید.
- کلید "SELECT" را جهت تایید مقادیر وارد شده بفشارید.
- کلید "▼" را برای کاهش مقادیر تنظیمات فشار دهید.
- کلید "LB/KG" را برای تغییر واحد اندازه گیری فشار دهید.

## نحوه عملکرد ترازو

### ۱. انتخاب واحد اندازه گیری قبل از استفاده

- درج جای باتری که در پشت ترازو قرار دارد را باز کنید.




- باتری را در محفظه قرار داده و از قرار گرفتن صحیح سرهای + / - باتری اطمینان حاصل نمایید. شکل روبرو بر روی LCD نمایش داده می شود.



- در باتری را بسته و منتظر بمانید تا عدد صفر بر روی صفحه نمایش داده شود

- توسط کلید "LB/KG" واحد اندازه گیری دلخواه خود را تعیین کنید.

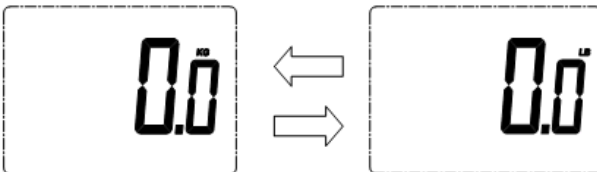

توجه : در صورتیکه به مدت + ۱۰ ثانیه از ترازو استفاده نشود، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

## ۲. ورود اطلاعات شخص قبل از استفاده

- با فشردن کلید "SELECT" ترازو روشن شده و عدد مربوط به کاربر به صورت چشمک زن در می آید.



- کلید "▲" یا "▼" را برای انتخاب عدد مورد نظر فشار دهید و در آخر دکمه "SELECT" را برای تأیید فشار دهید.



- در مرحله بعد عدد مربوط به قد به صورت چشمک زن در می آید. توسط کلید "▲" یا "▼" قد خود را وارد کرده و دکمه "SELECT" را برای تأیید بفشارید.



- بعد از نمایش عدد صفر می توان اقدام به اندازه گیری کرد.

توجه: اگر عملیاتی در قسمت تنظیمات انجام نشود دستگاه پس از ۲۰ ثانیه به صفحه اندازه گیری باز می گردد.

## ۳. اندازه گیری (انتخاب کاربر به صورت دستی)

- ترازو را بر روی سطح صاف قرار دهید. در صورتیکه ترازو بر روی فرش و یا سطح غیر صاف گذاشته شود سنجش با خطا همراه خواهد بود.


- توسط کلید "SELECT" ترازو را روشن کرده و با کلیدهای "▲" یا "▼" عدد کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.



- منتظر بمانید تا عدد صفر بر روی صفحه نمایش داده شود.



- روی سطح ترازو بایستید.

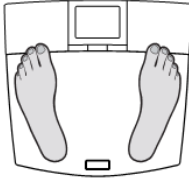


- چند لحظه منتظر بمانید تا وزن شما اندازه گیری شود.



- پس از اندازه گیری وزن، نتیجه بر روی صفحه نمایشگر نمایش داده شده و سپس ترازو به طور خودکار خاموش می شود.



۴. اندازه گیری (شناسایی) کاربر به طور خودکار)

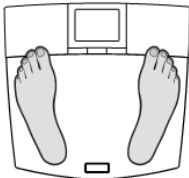

- روی ترازو بایستید تا دستگاه روشن شود.



- وزن اندازه گیری شده روی صفحه نمایشگر برای چند ثانیه نمایش داده می شود.

- اگر تنها یک کاربر وجود داشته باشد که وزن اندازه گیری شده نزدیک به وزن وی باشد، کاربر به طور خودکار شناسایی می شود، سپس نتایج نمایش داده شده و دستگاه خاموش می شود.

- اگر بیش از یک کاربر وجود داشته باشد که وزن اندازه گیری شده نزدیک به وزن آنها باشد، لیست کاربران شناسایی شده روی صفحه نمایش داده می شود. به طور مثال :



- از کلیدهای "▲" یا "▼" جهت انتخاب کاربر استفاده کنید. کلید "▲" را برای انتخاب کاربر P1 و "▼" را برای کاربر P2 بفشارید.

توجه : اگر عملیات انتخاب صورت نگیرد ترازو بعد از ۴۰ ثانیه خاموش می شود.

- بعد از اتمام عملیات انتخاب نتایج روی صفحه نمایشگر نمایش داده شده و ترازو خاموش می شود.



توجه : قبل از استفاده از این روش حداقل یک بار باید کاربر را به صورت دستی معرفی کرده باشید، در غیر این صورت ترازو تنها وزن را نشان می دهد (خطای عدم شناسایی کاربر)

### علائم خطا در اندازه گیری

\* نشانگر اتمام باتری:

وقتی "LO" نمایش داده می شود ترازو پس از چند ثانیه خاموش می شود. لطفاً باتری ها تعویض کنید.



\* نشانگر اضافه وزن:

برای محافظت از دستگاه بار اضافی را از روی آن بردارید.



\* نشانگر عدم شناسایی کاربر:

در اینصورت ترازو تنها وزن را نمایش داده و پس از چند ثانیه خاموش می شود. لطفاً عدد کاربر مورد نظر را وارد کرده و دوباره اندازه گیری نمایید.



## نکات مهم جهت استفاده صحیح

- \* بدون استفاده از جوراب و دمپایی از ترازو استفاده کنید.
- \* از قرار دادن ترازو بر روی موکت، فرش و یا سطح شیب دار جداً خودداری نمایید.
- \* هنگام استفاده از ترازو پاهای خود را خشک کرده و همچنین از خشک بودن سطح ترازو اطمینان حاصل نمایید.
- \* از قراردادن دستگاه در محل مرطوب و خیس جداً خودداری نمایید.
- \* برای تمیز کردن دستگاه از دستمال نم دار استفاده شده و همچنین از شوینده ها و مواد ساینده برای تمیز کردن ترازو استفاده نشود.
- \* در صورت استفاده نکردن از ترازو به مدت طولانی، بهتر است باتری ها از دستگاه جدا شود.
- \* باتری نو و استفاده شده با هم در دستگاه جاگذاری نشود و از باتری Alkaline استفاده کنید.
- \* بعد از جابجایی ترازو، به منظور اطمینان از دقت توزین، ابتدا یکبار آن را روشن کنید (یا روی آن بایستید) سپس منتظر بمانید تا ترازو خاموش شود. حال میتوانید دوباره روی ترازو رفته و وزن دقیق خود را مشاهده نمایید.

## تناسب اندام با تکنولوژی پیشرفته ترازوی دیجیتال

### درباره شرکت های تک

های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکتهای مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری های تک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

◀ تمامی محصولات سلامتی و طبی های تک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه می شود.

# hi-tec

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمائید.

[www.hitec-med.ir](http://www.hitec-med.ir)

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 