

# ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک



مدل: HI-AS66

با امکان محاسبه نسبی  
چربی بدن، آب، استخوان و ماهیچه


## رازهای درون خود را فقط در چند دقیقه کشف کنید

### مشخصات


- ❖ ظرفیت: ۱۳۱b ۲۳st ۳۳+ lb / ۱۵۰ Kg
- ❖ دقت سنجش: ۱۰۰ گرم
- ❖ واحد اندازه گیری: lb / st / kg
- ❖ کلیدهای عملیاتی: SET, ▲, ▼
- ❖ سنجش نسبی چربی بدن، آب، استخوان و ماهیچه
- ❖ ذخیره اطلاعات: نگهداری اطلاعات تا ۸ نفر و حفظ آخرین اطلاعات اندازه گیری شده
- ❖ صفحه نمایش LCD
- ❖ شناسایی کاربر به طور خودکار بر اساس آخرین اندازه گیری انجام شده
- ❖ روشن شدن با اشاره پا (سریع و راحت) - خاموش شدن خودکار
- ❖ فوق باریک
- ❖ منبع تغذیه ترازو: باتری (4×AA)
- ❖ نمایشگر ظرفیت بیش از حد: "----"
- ❖ نمایشگر اتمام باتری: "Lo"

### صفحه نمایشگر LCD

نمایشگر بزرگ برای نمایش همزمان تمامی اطلاعات

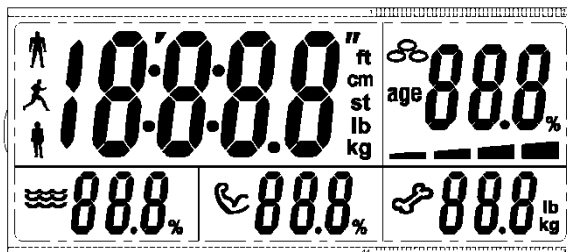


## کلیدهای عملیاتی

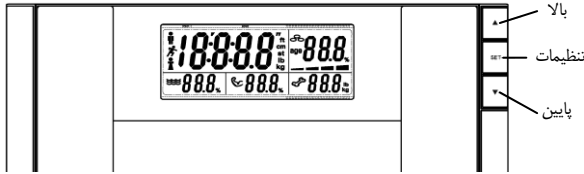

## نحوه جاگذاری باتری

از قرار گرفتن صحیح سرهای +/- باتری اطمینان حاصل نمایید.  
از ابزار مناسبی جهت تعویض باتری استفاده کنید.

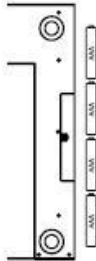

## نحوه وارد نمودن اطلاعات

✦ تنظیم اطلاعات شخصی (جنسیت/سن/قد) قبل از استفاده و ذخیره اطلاعات تنظیم شده برای ۸ نفر


۱. برای ورود به قسمت تنظیم اطلاعات ابتدا دکمه SET را فشار دهید، نمایشگر Pn را نمایش می دهد (n از بازه ۱ تا ۸ تعریف شده است). P1 اولین نفر و P8 آخرین نفری خواهند بود که اطلاعات ایشان در دستگاه نگهداری می شود. کلید ▲ و ▼ را برای تغییر مشخصات خواسته شده از جمله: سن، قد، جنسیت و تغییر تمامی اعداد فشار دهید و در آخر دکمه SET را برای تأیید فشار دهید.



پس از اتمام تنظیمات، ترازو به صورت خودکار به حالت اندازه گیری برمی گردد.



۲. تنظیم جنسیت: با استفاده از دکمه های بالا و پایین جنسیت مورد نظر (مرد ، زن ، ورزشکار) را انتخاب نموده و مجدداً SET را جهت تأیید اطلاعات فشار دهید .

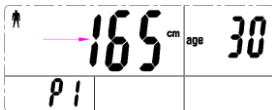

۳. تنظیم قد: با فشردن دکمه های بالا و پائین اندازه قد را انتخاب نموده و سپس دکمه SET را جهت تأیید اطلاعات فشار دهید .



۴. با فشردن دکمه های بالا و پائین سن را انتخاب نموده و سپس دکمه SET را جهت تأیید اطلاعات فشار دهید .

نحوه اندازه گیری وزن

۱. اندازه گیری پس از تنظیم اطلاعات

۱-۱. بعد از وارد کردن اطلاعات و تأیید آن، هنگامی که صفحه نمایشگر "00" را نمایش می دهد ، باید روی ترازو ایستاده و چند لحظه منتظر بمانید تا وزن شما اندازه گیری شود.



اشاره: ترازو بر روی سطح صاف قرار داده شود. در صورتیکه ترازو بر روی فرش یا سطح ناهموار گذاشته شود سنجش با خطا همراه خواهد بود.

۱-۲. پس از اندازه گیری وزن، چشمک زدن 0 نشان دهنده اندازه گیری میزان چربی توسط دستگاه می باشد پس از چندین بار چپ و راست رفتن 0 اندازه گیری انجام شده و نتیجه بر روی صفحه نمایشگر نمایش داده می شود .



۱-۳. پس از انجام اندازه گیری ، نمایشگر اطلاعات اندازه گیری شده چربی ، آب بدن ، ماهیچه و استخوان را نمایش می دهد و دستگاه حدوداً پس از ۲۰ ثانیه به طور خودکار خاموش می گردد .




## ۲. اندازه گیری بدون تنظیم اطلاعات




۲-۱. پس از اینکه وزن اندازه گیری شده ثابت ماند، اگر دستگاه قادر به شناسایی کاربر با توجه به وزنش نباشد، وزن حدود ۶ ثانیه نمایش داده شده و سپس ترازو به طور خودکار خاموش می شود.



۲-۲. در صورتیکه پس از اندازه گیری دستگاه بتواند کاربر را با توجه به وزنش تشخیص دهد، شروع به محاسبه چربی بدن می کند.

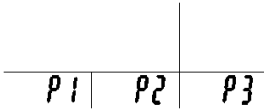

۲-۳. بعد از اینکه "0" از چشمک زدن باز ایستاد، ترازو کاربر را با توجه به وزنش تشخیص داده و شما با استفاده از کلید "SET" می توانید کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.

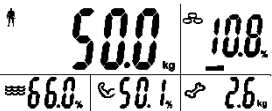

۲-۴. پس از انتخاب کاربر، نمایشگر اطلاعات اندازه گیری شده چربی، آب بدن، ماهیچه و استخوان را نمایش می دهد و دستگاه حدودا پس از ۲۰ ثانیه به طور خودکار خاموش می گردد.

### جدول راهنما

۱. محدوده اندازه گیری عضله بدن ۸۰٪-۱۰٪

مرد	زن	سن
متناسب	متناسب	
>۴۰	>۳۴	۱۰~۹۹

۲. محدوده اندازه گیری استخوان بدن (کیلوگرم) ۱۰-۰,۵ کیلوگرم

مرد			زن			وزن (کیلوگرم)
>۷۵	۶۰~۷۵	<۶۰	>۶۰	۴۵~۶۰	<۴۵	
۳,۲	۲,۹	۲,۵	۲,۵	۲,۲	۱,۸	استخوان (کیلوگرم)

۳. محدوده اندازه گیری چربی بدن ۶۰٪-۵٪

مرد				زن				سن
چاق	چربی ↑	ایده آل	چربی ↓	چاق	چربی ↑	ایده آل	چربی ↓	
>۲۴	۱۸-۲۴	۸-۱۸	<۸	>۳۰	۲۲-۳۰	۱۲-۲۲	<۱۲	۱۰-۱۲
>۲۴	۱۸-۲۴	۸-۱۸	<۸	>۳۳	۲۵-۳۳	۱۵-۲۵	<۱۵	۱۳-۱۸
>۲۴	۱۸-۲۴	۸-۱۸	<۸	>۳۶	۲۹-۳۶	۲۰-۲۹	<۲۰	۱۹-۳۰
>۲۶	۲۰-۲۶	۱۱-۲۰	<۱۱	>۳۸	۳۱-۳۸	۲۲-۳۱	<۲۲	۳۱-۴۰
>۲۸	۲۲-۲۸	۱۳-۲۲	<۱۳	>۴۰	۳۳-۴۰	۲۴-۳۳	<۲۴	۴۱-۵۰
>۳۰	۲۴-۳۰	۱۵-۲۴	<۱۵	>۴۲	۳۵-۴۲	۲۶-۳۵	<۲۶	۵۱-۶۰
>۳۴	۲۶-۳۴	۱۷-۲۵	<۱۷	>۴۷	۳۷-۴۷	۲۸-۳۷	<۲۸	بالای ۶۰

۴. محدوده اندازه گیری آب بدن ۸۰٪-۱۰٪

مرد	زن	سن
		متناسب
>۶۴	>۶۰	۱۰-۱۲
>۶۳,۵	>۵۸,۵	۱۳-۱۸
>۶۲,۵	>۵۶	۱۹-۳۰
>۶۱	>۵۳	۳۱-۴۰
>۶۰	>۵۲	۴۱-۵۰
>۵۹	>۵۱	۵۱-۶۰
>۵۸	>۵۰	بالای ۶۰

## نکات مهم جهت استفاده

- \* بدون استفاده از جوراب و دمپایی از ترازو استفاده کنید.
- \* از قرار دادن ترازو بر روی موکت، فرش و یا سطح شیب دار جداً خودداری نمایید.
- \* هنگام استفاده از ترازو پاهای خود را خشک کرده و همچنین از خشک بودن سطح ترازو اطمینان حاصل نمایید.
- \* از قراردادن دستگاه در محل مرطوب و خیس جداً خودداری نمایید.
- \* برای تمیز کردن دستگاه از دستمال نم دار استفاده شده و همچنین از شوینده ها و مواد ساینده برای تمیز کردن ترازو استفاده نشود.
- \* در صورت استفاده نکردن از ترازو به مدت طولانی، بهتر است باتری ها از دستگاه جدا شود.
- \* بعد از جابجایی ترازو، به منظور اطمینان از دقت توزین، ابتدا یکبار آن را روشن کنید (یا روی آن بایستید) سپس منتظر بمانید تا ترازو خاموش شود. حال میتوانید دوباره روی ترازو رفته و وزن دقیق خود را مشاهده نمایید.

## آگاهانه سلامتی خود را کنترل نمایید

### درباره شرکت های تک

های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکتهای مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری های تک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

های تک محصولات خود را با بهترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

◀ تمامی محصولات سلامتی و طبی های تک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه می شود.

# hi-tec

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

**Hi-tec Medical Equipments INC.**

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمایید.

[www.hitec-med.ir](http://www.hitec-med.ir)

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 