

HI-801


ترازوی دیجیتال با دسته استیل برای جابجائی آسان و اندازه گیری  
وزن تا 180 کیلوگرم



hi-tec

HI-801

## اندازه گیری وزن تا 180 کیلوگرم

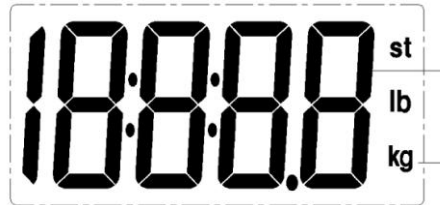

واحد وزن

وزن اندازه گیری

شده

### نمایشگر بزرگ برای خواندن آسان اعداد

- ظرفیت: 180 کیلوگرم
- 180kg/397lb
- نمایشگر ظرفیت بیش از حد: "-----"
- نمایشگر اتمام باتری: "LO"
- منبع تغذیه: باتری (4×AAA)
- دقت ترازو: 100 گرم
- اندازه سطح ترازو: 32×32 سانتیمتر
- ارتفاع ترازو: 22 میلیمتر

### سطح گسترده برای ایستادن راحت

نحوه تعویض باتری

- از قرار گرفتن صحیح سرهای +/- باتری اطمینان حاصل نمایید.
- از ابزار مناسب جهت تعویض باتری ها استفاده نمایید.

انتخاب واحد اندازه گیری

جهت انتخاب واحد اندازه گیری مورد نظر خود کلید پشت ترازو را فشار دهید.

## تلفیقی از صنعت، تکنولوژی و هنر

### نحوه اندازه گیری

1. کلید "UNIT" را فشار دهید تا ترازو روشن شود و امکان تغییر واحد وجود داشته باشد.



2. پس از انتخاب واحد اندازه گیری (کیلوگرم) ترازو را بر سطح صاف (از قرار دادن ترازو بر روی موکت، فرش و یا سطح شیب دار جداً خودداری نمائید) قرار داده و اجازه دهید تا دستگاه خاموش شود.
3. بر روی ترازو ایستاده تا دستگاه روشن شود و پس از چند بار چشمک زدن وزن اندازه گیری شده نمایش داده می شود و پس از 10 ثانیه دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود.
4. در صورتیکه برای مدت طولانی از ترازو استفاده نمی کنید از قرار دادن اجسام بر روی آن جداً خودداری کنید.

### نکات مهم جهت استفاده صحیح

- بدون استفاده از جوراب و دمپایی از ترازو استفاده کنید.
- از قرار دادن ترازو بر روی موکت، فرش و یا سطح شیب دار جداً خودداری نمائید.
- هنگام استفاده از ترازو پاهای خود را خشک کرده و همچنین از خشک بودن سطح ترازو اطمینان حاصل نمائید.
- از قرار دادن ترازو در کنار امواج الکترو مغناطیس (رادیو و ...) خودداری کنید.
- هنگامیکه ترازو روشن است یکبار از آن برای وزن کردن استفاده کنید، برای وزن کردن دوباره کمی صبر کنید تا دستگاه خاموش شود و سپس اندازه گیری را انجام دهید، در غیر این صورت دستگاه بیش از مقدار وزن شما را نشان خواهد داد.

### ♥ درباره شرکت های تک

شرکت های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری شرکت های تک مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

شرکت های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور و ... است را با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه نمائید.

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

[www.hitec-med.ir](http://www.hitec-med.ir)

# hi-tec

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

**Hi-tec Medical Equipments INC.**

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات های تک به سایت زیر  
مراجعه نمایید.

[www.hitec-med.ir](http://www.hitec-med.ir)

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 