



## HI-EM212

شادابی چشم ها و از بین رفتن چین و چروک و  
کبودی دور چشم با ماساژور چشمی های تک

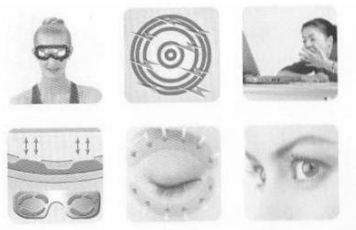

hi-tec

## معرفی اجزاء دستگاه ماساژور چشمی

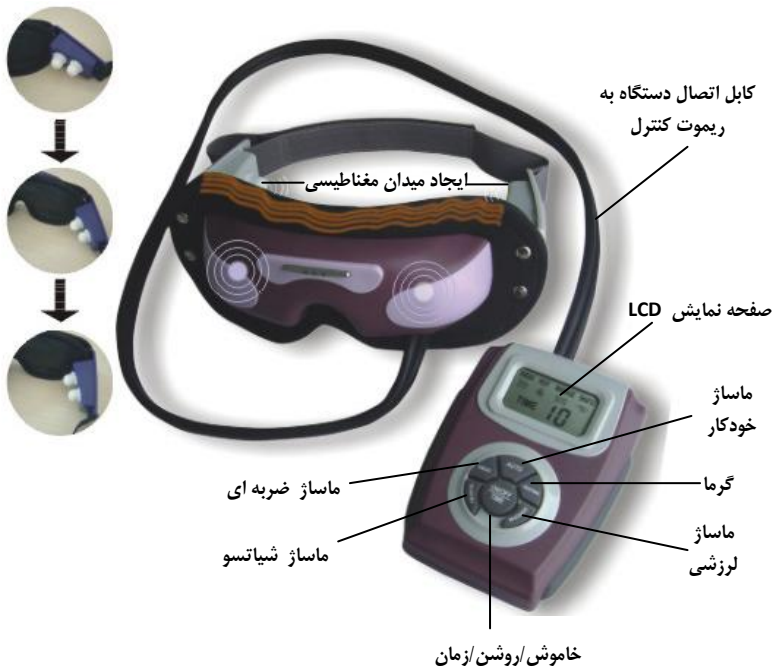

بعد از یک روز کاری سخت، آرامش را به چشمان خود هدیه کنید

## مشخصات فنی دستگاه

- برق مصرفی: ۶ وات
- نوع اتصال: آداپتور و باتری (۴ عدد)
- سرعت چرخش موتور: ۳۰۰۰ دور در دقیقه
- جریان مصرفی موتور: ۶۰ میلی آمپر
- جریان مصرفی ورود فشار هوا: ۲۰۰ میلی آمپر
- طول بخش گرمائی: ۱ متر

## مشخصات کلی دستگاه

- ۲ موتور با ۶ حالت ماساژ شیاتسو
- ۲ موتور با ۶ حالت ماساژ لרزشی و ضربه ای
- ۴ حالت ورود هوا به کیسه مخصوص هوا برای ماساژ نبضی چشم
- سیستم گرمایش به روش فار اینفرارد برای ایجاد گرمای مطبوع
- مجهز به آداپتور برای اتصال به برق و محلی برای جاگذاری باطری
- زمان اتوماتیک در نظر گرفته شده برای ماساژ ۵، ۱۰ و ۱۵ دقیقه
- دارای ۶ روش مختلف ماساژ، از جمله: ضربه ای، گرمایی، شیاتسو، لرزشی، فشار هوا و ایجاد میدان مغناطیسی
- دارای دکمه اتوماتیک برای لذت بردن از تمامی ماساژها بصورت رندوم و دوره ای
- طراحی منحصر بفرد با کارایی بالا
- ایجاد میدان مغناطیسی توسط برآمدگی های کنار دسته ماساژور چشمی جهت بهبود گردش جریان خون
- مجهز به ریموت کنترل با تکنولوژی میکرو کامپیوتر چیپ و صفحه کلید مدور با کاربرد آسان

هابتک تلفیقی از صنعت، دقت، تکنولوژی و هنر

## تأثيرات ماساژور چشمی

دستگاه ماساژور چشمی تأثيرات بسياری با استفاده صحيح و کاربردی بر روی چشمان شما خواهد داشت.

- محافظ سلامتی چشمان
- رفع سردرد و خستگی چشمان ناشی از بيخوابی
- کمک به درمان آستيگماتيسم، نزديک بينی و دور بينی چشمان
- بهبود نزديک بينی
- کمک به بالا بردن دید چشمان
- رفع خستگی چشمان
- بهبود گردش جريان خون
- راحتی و تمدد اعصاب چشمان
- رفع سياهی دور چشم
- رفع چين و چروک دور چشم



اسفنج بکار رفته در ماساژور چشمی تأثير بسزایی در نرم بودن آن داشته بطوریکه بينی شما هيچگونه سنگینی را بر روی خود احساس نخواهد کرد



بند چسب دار ماساژور چشمی یک ماساژ راحت و بدون احساس درد را به شما هديه می کند

## نحوه استفاده

۱. با فشردن دکمه "ON/OFF/TIME" دستگاه روشن می شود.
۲. برای خاموش کردن دستگاه دکمه "ON/OFF/TIME" را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگاه داشته تا دستگاه خاموش شود.
۳. برای استفاده از ماساژ بصورت خودکار باید در ابتدا دکمه "AUTO" را فشار داده و یکی از دو حالت ماساژ خودکار را که در ادامه به آن اشاره شده است، انتخاب نمایید.  
حالت اول ماساژ خودکار: ترکیبی از ۴ حالت ماساژ ضربه ای، شیاتسو، لرزشی و گرمایی نکته: در ابتدا حالت گرمایی شروع شده و برای ۶۰ ثانیه گرما تولید کرده و برای ۳۰ ثانیه توقف می کند و این عملکرد در مدت زمان ماساژ ادامه خواهد داشت.  
حالت دوم ماساژ خودکار: ترکیبی از ۲ حالت ماساژ شیاتسو و لرزشی تنظیم زمان ماساژ: پس از روشن شدن دستگاه یکبار دکمه "ON/OFF/TIME" را فشار دهید (بدون نگهداشتن دکمه). با فشار اول زمان ۱۰ دقیقه را نمایش داده و با فشار بعدی زمان ۱۵ دقیقه را بر روی صفحه نمایش می دهد و با فشار سوم زمان بر روی ۵ دقیقه تنظیم می شود. چرخه زمان ماساژ از ۵ دقیقه به ۱۰ دقیقه و در آخر به ۱۵ دقیقه می رسد.  
ورود فشار هوا به ماساژور: با فشردن دکمه "KNEAD" هوا وارد ماساژور می شود. برای تنظیم فشار هوا (کم یا زیاد بودن هوای داخل ماساژور) بایستی دکمه "KNEAD" را چندین بار فشار دهید.  
استفاده از سیستم گرمایی ماساژور: برای استفاده از گرمای مطبوع ماساژور باید دکمه "HEATING" را فشار دهید. گرمای دستگاه تا ۳ درجه قابل تغییر است که با فشردن مجدد دکمه "HEATING" می توان آنرا تنظیم نمود.  
ماساژ لرزشی: برای استفاده از ماساژ لرزشی باید دکمه "MASSAGE" را فشار داده و برای استفاده از ۶ حالت مختلف ماساژ لرزشی بایستی مجدداً دکمه "MASSAGE" را فشار دهید.  
ماساژ به روش شیاتسو: برای استفاده از ماساژ به روش شیاتسو باید دکمه "SHIATSU" را فشار داده و برای استفاده از ۶ حالت مختلف این نوع ماساژ بایستی مجدداً دکمه "SHIATSU" را فشار دهید.

## استفاده کاربردی، آسان و موثر

### نکات مهم

- هنگام تمیز کردن دستگاه اطمینان حاصل نمایید که دستگاه حتماً از پریز برق جدا شده باشد.
- دستگاه را در محلی که ممکن است ضربه یا صدمه ای به آن وارد شود نگهداری نکنید.
- از نگهداری دستگاه در مکان مرطوب جداً خودداری کنید.
- از ماساژور زیر دوش و یا در حمام استفاده نشود.
- دستگاه در زیر بالش، پتو و یا هر مکانی که تهویه هوا در آن وجود ندارد استفاده نشود.
- از خیس شدن دستگاه جداً خودداری کنید.
- سیم از پریز بشدت جدا نشود.
- بعد از استفاده کلید ماساژور را در حالت خاموش قرار داده و از پریز بکشید.
- از برخورد سیم با سطوح گرم جداً خودداری کنید.
- درجه حرارت محیط نگهداری ماساژور باید بین  $5^{\circ}\text{C}$ - $40^{\circ}\text{C}$  باشد.
- در صورت استفاده از باتری، از صحیح قرار گرفتن سرهای  $+/-$  در دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- مقدار رطوبت محل نگهداری: ۸۰٪

هایتک متنوع و زیبا در طرح، بهترین در کارایی

## قیمت مناسب، کیفیت برتر و گارانتی مطمئن

◀ تمامی محصولات سلامتی و طبی های تک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه می شود.

### ♥ درباره شرکت های تک

های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری های تک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

با محصولات سلامتی های تک زیبایی و شادابی را به زندگی خود و اطرافیانان هدیه کنید

# hi-tec

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

**Hi-tec Medical Equipments INC.**

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات های تک به سایت زیر  
مراجعه نمایید.

[www.hitec-med.ir](http://www.hitec-med.ir)

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 