

دفترچه راهنمای فارسی

ماساژور پا هایتک




مدل HI-FM609

مشخصات فنی و ویژگی های دستگاه

- ولتاژ: ۲۲۰V
- توان مصرفی: ۵۰W
- زمان هر دوره ماساژ: ۱۵ دقیقه
- قابلیت تنظیم سرعت ماساژ و تغییر حالت ماساژ
- دارای قابلیت ماساژ گرمایی ، غلطکی ، فشار باد و مالشی
- روکش داخلی قابل شستشو
- بسیار آسان در جابجایی با طراحی زیبا و وزن سبک و سیم جمع کن در قسمت زیر دستگاه

راهنمای دکمه ها

نمایشگر زمان

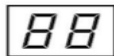

تنظیم مدت زمان ماساژ



انتخاب حالت ماساژ



تنظیم سرعت و شدت ماساژ



ماساژ گرمایی



دکمه روشن / خاموش



♥ نحوه استفاده از دستگاه

- سیم برق را به پریز متصل کنید .
- پس از روشن شدن ، دستگاه روی این حالت تنظیم است : حالت ماساژ گرمایی فعال است - شدت ماساژ روی حالت ضعیف است و ماساژور روی حالت ماساژ (۱) تنظیم است .
- جهت خاموش کردن گرمایش ، دکمه HEAT را فشار داده تا چراغ آن خاموش و حالت گرمایی قطع شود .
- هنگامی که دستگاه روشن است ، با فشردن دکمه INTENSITY می توانید شدت ماساژ خود را تغییر دهید .
- هنگامی که دستگاه روشن است ، با فشردن دکمه MODE حالت ماساژ خود را تغییر دهید .

♥ نکات مهم

- پس از هر بار استفاده دستگاه را از برق بکشید .
- استفاده از ماساژ گرمایی برای افرادی که حساسیت و سوختگی پوستی دارند توصیه نمی شود . همچنین از استفاده کودکان از دستگاه جلوگیری کنید .
- با توجه به خطر برق گرفتگی و آتشسوزی از استفاده از دستگاه زیر بالشت یا پتو خودداری کنید .
- در صورت مشاهده هر گونه خرابی دستگاه از باز کردن دستگاه و اقدام به تعمیر آن خودداری کرده و سریعاً با واحد پشتیبانی تماس بگیرید .
- از برخورد آب با دستگاه و استفاده از آن در کنار سطوح مرطوب و یا دستان مرطوب خودداری کنید .
- تا ۱ ساعت قبل و بعد از خوردن غذا ترجیحاً از دستگاه استفاده نکنید .
- استفاده از دستگاه بیش از ۳۰ دقیقه بطور مستمر توصیه نمی شود .

hi-tec

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمائید.

www.hiteciran.com

www.hitec-med.ca

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 