


HI-HM416

آرامش واقعی با ماساژور دستی هایتک با  
۷ کلاهک جادویی



hi-tec

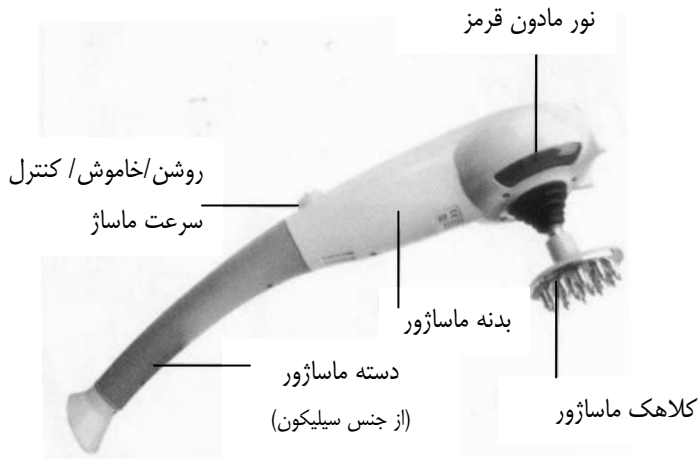

#### مشخصات دستگاه

- وزن: ۱/۲ کیلو گرم
- ابعاد: ۱۳۰×۱۲۰×۴۵۰
- برق مصرفی: ۳۰ وات
- نوع اتصال: آداپتور
- فرکانس: ۵۰-۶۰ هرتز
- سرعت چرخش موتور: ۵۰۰۰ - ۱۰۰۰۰ پالس/ثانیه


بعد از یک روز کاری سخت، آرامش را به خود هدیه کنید

## نحوه استفاده

- در ابتدا بایستی کلاhek مورد نظر بر روی ماساژور نصب شود.
- ماساژور را روشن کرده و سرعت ماساژ را توسط کلید تعیبه شده روی ماساژور انتخاب کنید.
- بهتر است از سرعت پائین شروع به ماساژ کرده و آرام آرام، بر سرعت ماساژ افزوده شود.
- برای ماساژ موثر، بهتر است از دست شروع کرده و سپس پا، پشت و در آخر پهلوها را ماساژ دهید.
- مدت زمان ایده آل برای ماساژ ۱۵ دقیقه بوده و نباید بیش از ۲۰ دقیقه از ماساژور استفاده شود. در صورت استفاده بیش از زمان تعیین شده، بعد از ۲۰ دقیقه ماساژور به طور خودکار خاموش خواهد شد. و نهایتاً پس از ۳۰ دقیقه مجدداً امکان استفاده از ماساژور وجود خواهد داشت.

## زمان مناسب جهت استفاده از ماساژور

- یک ساعت پس از بیدار شدن از خواب
- یک ساعت پس از صرف غذا
- قبل از خواب (ایجاد آرامش و کمک به خواب راحت)
- پس از تمرینات سخت ورزشی
- برای بهتر شدن سوخت و ساز بدن، بایستی پس از ماساژ یک لیوان آب نوشیده شود.

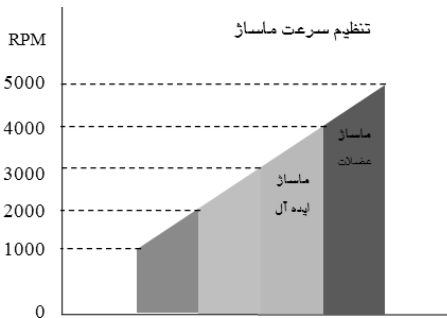

## شرح عملکرد ۷ کلاهک مخصوص ماساژور



**کلاهک سوزنی شکل طلانی:**  
استفاده در نقاط طب سوزنی از جمله کف دست، کف پا، ران و پاها



**کلاهک سوزنی شکل نقره ای:**  
استفاده بر روی کمر، ران و شانه ها و از بین برنده چربی شکم



**کلاهک مفصلی شکل:** استفاده بر روی مفاصل زانو و آرنج و همچنین استفاده بر روی بازوها



**کلاهک سوزنی شکل:** استفاده بر روی نقاط طب سوزنی و نواحی حساس بدن که دارای پوست نازک است



**کلاهک شانه ای شکل:** استفاده بر روی گردن، کف، شانه و عضلات



**کلاهک ۴ تایی:** استفاده بر روی نواحی مختلف بدن

**کلاهک لوله ای شکل:** استفاده بر روی نقاط طب سوزنی و پروستات



## هایتک تلفیقی از صنعت، دقت، تکنولوژی و هنر

### موارد منع استفاده

- این محصول برای استفاده اطفال و افراد ضعیف مناسب نمی باشد.
- در نواحی متورم، ملتهب (شکستگی، کبودی و...)، بیماری های پوستی و بریدگی و نواحی جراحی شده استفاده نشود.
- در نواحی غدد تیروئید، واریس، چشم و گوش مورد استفاده قرار نگیرد.
- خانم های باردار از ماساژور فقط در نواحی فوقانی کمر می توانند استفاده کنند.

### نکات مهم

- هنگام تمیز کردن دستگاه اطمینان حاصل نمائید که دستگاه حتماً از پریز برق جدا شده باشد.
- دستگاه را در محلی که ممکن است ضربه یا صدمه ای به آن وارد شود نگهداری نکنید.
- از نگهداری دستگاه در مکان مرطوب جداً خودداری کنید.
- از ماساژور زیر دوش و یا در حمام استفاده نشود.
- دستگاه در زیر بالش، پتو و یا هر مکانی که تهویه هوا در آن وجود ندارد استفاده نشود.
- از خیس شدن دستگاه جداً خودداری کنید.
- سیسم از پریز بشدت جدا نشود.
- بعد از استفاده کلید ماساژور را در حالت Off قرار داده و از پریز بکشید.
- از برخورد سیسم با سطوح گرم جداً خودداری کنید.

## قیمت مناسب، کیفیت برتر و گارانتی مطمئن

◀ تمامی محصولات سلامتی و طبی های تک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه می شود.

### ♥ درباره شرکت های تک

های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری های تک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

با محصولات سلامتی های تک زیبایی و شادابی را به زندگی خود و اطرافیان هدیه کنید

# hi-tec

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

**Hi-tec Medical Equipments INC.**

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات های تک به سایت زیر  
مراجعه نمایید.

[www.hitec-med.ir](http://www.hitec-med.ir)

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 