

دفترچه راهنمای فارسی

ماساژور هایتک




مدل HI-HM731

مشخصات فنی و ویژگی های دستگاه

- ولتاژ : 200-220V
- فرکانس : 50 HZ
- توان مصرفی : 28W
- قابلیت تنظیم سرعت ماساژ
- دارای ماساژ گرمایی
- دارای 3 کلاهک ماساژ قابل تعویض
- قابلیت ماساژ گرمایی
- از بین برنده درد و گرفتگی عضلات و تشدید جریان خون در بدن

اجزای تشکیل دهنده دستگاه

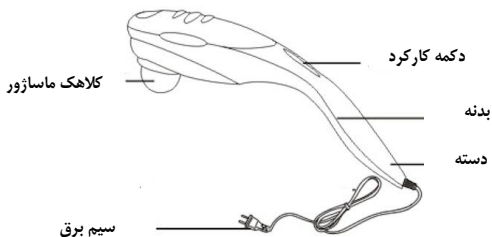

♥ نکات مهم

- از تماس هر یک از اجزای دستگله با آب و سطوح مرطوب جداً خودداری کنید .
- از تماس دستگاه با منابع گرم مانند آتش ، بخاری ، آفتاب جلوگیری کنید .
- از گذاشتن اجسامی با وزن بیش از ۱۵kg روی دستگاه خودداری کنید .
- اگر هنگام استفاده متوجه گرمای غیر طبیعی و بوی بد از طرف دستگاه شدید آن را خاموش کنید .
- توصیه می شود هر یک از نقاط بدن را بیش از ۱۵ دقیقه ماساژ ندهید .
- استفاده از این دستگاه برای کودکان و خانم های باردار و افرادی که بیماری های پوستی دارند توصیه نمی شود .
- پس از اتمام استفاده دستگاه را خاموش و از برق بکشید .

hi-tec

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمائید.

www.hiteciran.com

www.hitec-med.ca

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 