

دفترچه راهنمای فارسی

ماساژور هایتک



مدل HI-HM737


مشخصات فنی ♥

- ولتاژ: 220-240V
- فرکانس: 50-60 HZ
- توان برق: 25W
- مدت زمان هر دوره ماساژ: ۱۵ دقیقه

ویژگیهای دستگاه ♥

- دارای ۳ سر قابل تعویض
- دسته جدا شونده جهت سهولت استفاده
- قابلیت ماساژ گرمایی
- از بین برنده درد و گرفتگی عضلات
- تشدید جریان خون در بدن

اجزای دستگاه ♥

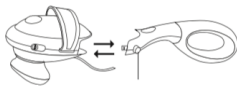


دکمه جداکننده را در هر دو طرف ماساژور فشار دهید و دسته ماساژور به سمت عقب کشیده تا از بدنه جدا شود.

شکل ۲

دسته کمر بند دست تنظیم سرعت

دکمه
روشن / خاموش

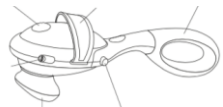

سری ماساژور

دکمه جدا کننده
دسته

شکل ۱



لطفاً درب انتهای بدنه ماساژور را روی آن ببندید تا از بدنه آن به تنهایی استفاده کنید برای استفاده از دسته ، درب را جدا کرده و دسته را متصل کنید.

شکل ۳

نحوه استفاده از دستگاه ♥

لطفاً از خاموش بودن ماساژور (دکمه OFF) مطمئن شده ، سپس دوشاخه آن را به پریز برق متصل کنید . سپس دکمه ماساژور را روی حالت (M) قرار دهید تا دستگاه روشن شود . یک دکمه دوار روی دستگاه تعبیه شده که برای تغییر قدرت ماساژ می باشد . دکمه را ساعت گرد بچرخانید تا به قدرت ماساژ دلخواه خود برسید . برای استفاده از ویژگی گرمایی ماساژور ، دکمه کناری آن را در حالت (M+L) بگذارید . هیچ یک از اعضای بدن را بیشتر از 15-20 دقیقه بطور مداوم ماساژ ندهید . پس از اتمام استفاده از ماساژور ، دکمه کناری آن را در حالت OFF قرار داده و آن را از پریز برق جدا کنید.

♥ نکات مهم

- لطفاً دستگاه را در محدوده ولتاژ مشخص شده استفاده کنید .
- استفاده این دستگاه برای خانم های باردار و افرادی که دارای حساسیت های پوستی و یا بیماری های عفونی هستند توصیه نمی شود .
- از استفاده دستگاه بر روی بدن خیس خودداری کنید .
- دستگاه را از آب و یا هر گونه سطح خیس به دور نگاه دارید .
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید حتماً آن را خاموش کنید و هیچ گاه دستگاه را روشن و بدون استفاده در جایی رها نکنید .
- ترجیحاً بیش از یک ساعت مداوم با دستگاه کار نکنید و کمی آن را خاموش کنید تا به دستگاه فشار زیاد وارد نشود .

محصولات هایتک با گارانتی فاره



MASSAGER

ماساژور



DIGITAL KITCHEN SCALE

ترازوی دیجیتال
آشپزخانه



DIGITAL BATHROOM SCALE

ترازوی دیجیتال



MISCELLANEOUS

سایر محصولات



AIR HUMIDIFIER

رطوبت ساز



BLOOD PRESSURE
MONITOR

فشار سنج



hi-tec

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمائید.

www.hiteciran.com

www.hitec-med.ca

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 